

Wózek specjalny dla dzieci **eclips X4 kids**

Aluminiowy wózek specjalny stabilizujący plecy i głowę dla dzieci. Oparcie odchylane do poziomu w sposób płynny przy użyciu sprężyn hydraulicznych. Przedłużenie oparcia gwarantuje podparcie głowy (ściągane). Podnóżki z regulacją kąta z podparciem pod łydki. Podłokietniki w kształcie aluminiowych ochraniaczy lub klasyczne rurkowe. Wózek modułowy, umożliwią rozbudowę o wiele opcji dodatkowych, dzięki czemu można go skonfigurować dokładnie pod indywidualne wymagania dziecka.

Rama główna wózka umożliwia ustawienie różnej głębokości siedziska, dzięki czemu można go dopasować do dziecka bardzo szczupłego ale np. wysokiego.



Orteza **TARTA**® fantastycznie spełnia rolę stabilizatora, prawidłowego podparcia i odciążenia kręgosłupa u osób z utrwalonymi deformacjami takimi jak: skolioza, lordoza, kifoza...

Orteza **TARTA**® spełnia również rolę aparatu do korygowania wad kręgosłupa we wczesnej fazie ich rozwoju. Szczególnie ważne w profilaktyce dziecięcej...



50
55



32
37



15
18



42
47



35
40



90°



31-33-35-37
31-33-35-37



16



60

rama:



C37



C36




C35



C34

tapicerka

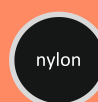

nylon

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm

