

Wózek aluminiowy



eclips **XXL**



Wózek aluminiowy



eclips XXL

Nowej generacji wózek wykonany z aluminium. Konstrukcja oparta na podwójnym krzyżaku wykonanym z grubościennego wysokiej jakości aluminium. W standardzie komfort anatomicznego siedzenia i oparcia oraz odpowiednia stabilizacja. Jak wszystkie nasze konstrukcje tak również XXL umożliwia doposażenie w wiele funkcjonalnych opcji.

200 kg




Opcja dodatkowa -hamulce bębnowe. Konstrukcja hamulca wbudowana jest w piastę koła tylnego i wykorzystuje aluminiowy specjalny bęben wyposażony w elementy, które zmieniają swoje położenie po naciśnięciu uchwytów hamulca, które są zamontowane przy rączkach do pchania wózka. Elementy pokryte są specjalnym tworzywem ściernym, o wysokim współczynniku tarcia co gwarantuje wysoką skuteczność i olbrzymią żywotność. **Rozwiązanie takie gwarantuje również, że podczas hamowania opona nie jest zdzierana.** Opcja szczególnie ważna w terenie o dużym stopniu nachylenia (teren górzisty). Dla osoby pchającej wózek rozwiązanie bardzo bezpieczne gwarantujące, że nie wyrwie się z rąk. A przede wszystkim najważniejsze, że nie trzeba używać siły aby utrzymać wózek z osobą niepełnosprawną.

Z takim rozwiązaniem można bezpiecznie kontrolować zachowanie się wózka podczas jazdy po terenie o dużym kącie nachylenia. Szczególnie ważne kiedy osoba wieszona jest ciężka.



| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|-----|--------|-----|
| | | | | | | | | |
| 85 | 60 | 20 | 53 | 57 | 53 | 114 | ~30 kg | 200 |
| 90 | 65 | | | | 54 | | | |
| 95 | 70 | | | | 55 | | | |
| 100 | 75 | | | | 56 | | | |

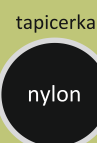

Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

